




Iskra Medical

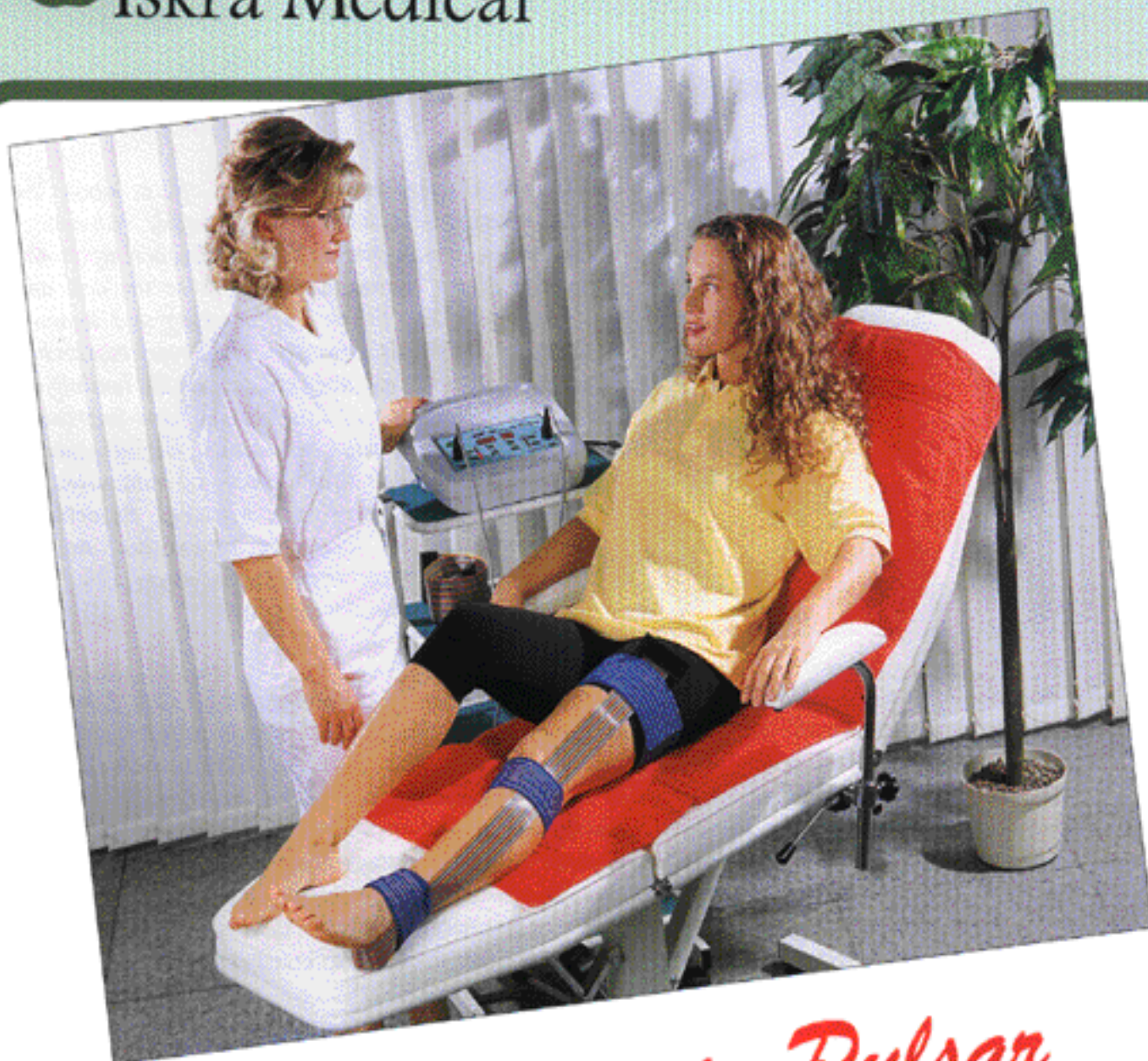

## **HF Magneto Pulsar**

Магнитное поле использовалось для терапевтических целей с давних времен. Для этого использовали только природные магниты. Но только после открытия связи между электричеством и магнитным полем был окончательно доказан их терапевтический эффект на ткани и органы.



Магнитотерапия обладает стабилизирующим эффектом на структуру клетки, улучшает кровоснабжение тканей, нормализует обменные процессы, стабилизирует ферментативную активность, укрепляет неспецифическую защиту, тем самым способствует восстановлению органов и тканей, а так же укрепляет иммунную систему организма в целом.

Различные научные исследования подтверждали выраженный эффект оздоровления костных тканей, связочного аппарата, устранение остеохондроза и

улучшение кровотока. Высокочастотная магнитотерапия имеет широкий спектр применения. Она может быть использована в случаях перелома костей, ушибах, при нарушении опорнодвигательного аппарата человека, мышечных разрывов, остеопорозов, психосоматических болезней.

Прибор HF Магнитопульсар это возможность использовать различные терапевтические частоты. Несущая частота модулируется терапевтическими частотами. При различных патологиях должны быть использованы различные частоты. Обе частоты могут быть использованы от 1-99 секунд одновременно. Два канала прибора могут работать одновременно либо независимо. Интенсивность поля может быть отрегулирована на каждом канале отдельно перед терапевтической процедурой. Терапия проводится с помощью специального пояса (ремня), состоящего из нескольких электрических проводников, которые генерируют магнитное. Особое преимущество ремня в том, что он находится вокруг зоны воздействия, терапию можно проводить и на одной стороне. Прибор имеет два независимых канала и может одновременно проводить терапию двух пациентов или две зоны одного пациента.

Мы не игнорируем факт, что магнитная терапия может быть более успешной в комбинации с другими терапиями, в частности с лазерной.

#### Техническая характеристика:

1. Несущая частота: 27.12 MHz
2. Терапевтические частоты: 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 Hz
3. 2 независимых канала
4. Продолжительность процедуры: от 1 до 99 секунд
5. Электропитание: 230V, 50Hz
6. Потребляемая мощность: 30 Va
7. Вес: 1.85 кг
8. Размеры: 30x30x14см
9. Классификация: тип IBF
10. Аксессуары: 2 терапевтических ремня

