

Iskra Medical



CE 0123

RDT[®] system
radial endo dermo therapy system

PATENT ST. 20906


Green VAC

- Аппарат для улучшения микроциркуляции и растяжения тканей при помощи пульсирующего отрицательного давления
- Три аппликатора круглой формы разных диаметров, обеспечивающие образование под колпачком кольцеобразной выпуклости кожи
- Пять стандартных программ и пять свободных программ


Плохое кровообращение и застой лимфатической жидкости способствуют изменениям наружного слоя кожи и подкожных тканей. В последствии в этих частях накапливаются вредные отходы от процессов обмена веществ-шлаки. Соединительная ткань набухает, внешний вид кожи заметно ухудшается. На поверхности кожи появляются впадины и выпуклости, придающие коже вид апельсиновой коржур, известные симптомы целюлита.

Новый аппарат **»GREEN VAC«**, отличающийся простым, но эффективным способом применения, представляет собой новый шаг вперед в области ухода и лечения изменений в подкожных тканях. Терапия базируется на пульсирующем отрицательном давлении. Лечение с помощью вакуума уже столетия применяется для улучшения микроциркуляции и растяжения соединительной ткани. Аппликаторы специальной формы с вращающимся шариком в середине, помимо высасывания воздуха, способствуют формированию колцеобразной выпуклости кожи, в которой одновременно происходит массаж и растяжка подкожных слоев. Таким образом усиливается не только прилив свежей крови, но и отлив венозной крови и дренаж лимфатической жидкости. Отрицательное давление способствует растяжению тканей и лизису жировых запасов, накопившихся в подкожном пространстве, что положительно влияет на состояние кожи. Использование аппликаторов разной величины дает возможность проведения терапии на любом критическом участке кожи и на неудобных для доступа местах. Возможность регуляции верхней и нижней величины отрицательного давления допускает применение данной терапии даже на очень чувствительной коже. Скорость пульсации и продолжительность воздействия отрицательного давления допускается регулировать индивидуально. Перед установкой аппликаторов, в кожу можно втереть противоцелюлитный крем. Для обеспечения более гладкого скольжения аппликаторов и их хорошего контакта с поверхностью кожи рекомендуется использовать массажное масло.


Показания для применения аппарата **»GREEN VAC«**: эдематозная стадия целюлита, фиброзная стадия целюлита, рубцовая стадия целюлита, уход и разглаживание морщин на лице, обработка свежих рубцов, келоиды, повреждения подкожной ткани из-за растяжения при беременности или быстром прибавлении веса.

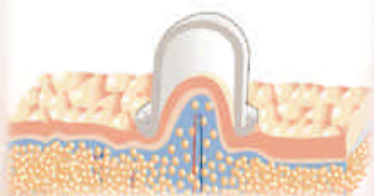

ТРАДИЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БАНКАМИ

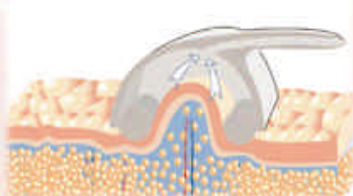

ТЕРАПИЯ, ОБРАЗУЮЩАЯ
ПРОДОЛЬНУЮ
ВЫПУКЛОСТЬ КОЖИ

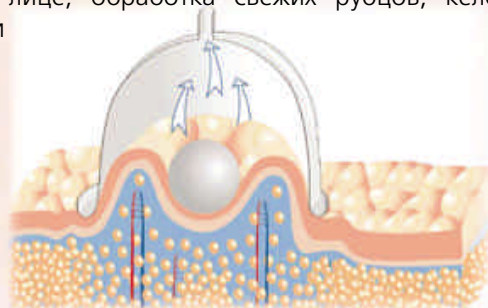

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МЕТОД С КОЛЬЦЕОБРАЗНОЙ
ВЫПУКЛОСТЬЮ КОЖИ

»RDT SYSTEM - GREEN VAC« VDPG 80



- VPG 80 АППЛИКАТОР D80 мм
- VPG 60 АППЛИКАТОР D 60 мм
- VPG 35 АППЛИКАТОР D 35 мм
- VPG 25 АППЛИКАТОР D 25 мм
- VG 25 АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 25 мм
- VG 20 АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 20 мм
- VG 15 АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 15мм
- VG 10 АППЛИКАТОР ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА - СТЕКЛЯННЫЙ D 10 мм
- VPG НАБОР КОЛПАЧКОВЫХ АППЛИКАТОРОВ
- VG НАБОР СТЕКЛЯННЫХ АППЛИКАТОРОВ
- KV КОМПЛЕКТ АППЛИКАТОРОВ
- VDPG 50 АППЛИКАТОР ДВОЙНОЙ D 80 мм
- VDPG 60 АППЛИКАТОР ДВОЙНОЙ D 60 мм
- RAPG 80 АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 80 мм
- RAPG 60 АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 60 мм
- RAPG 35 АППЛИКАТОР РАДИАЛЬНЫЙ D 35 мм
- СК ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОЧКИ

Технические данные:

Тип аппарата: GREEN VAC
Сетевое напряжение: 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 150 ВА

Тип предохранителей: 2 x 1,6 АТ

Масса аппарата: 6 кг

Масса чемоданчика с компл.аппликаторов: 4 кг

Корпус: полистироловый PS 06

Цвет корпус: светлосерый

Габаритные размеры: 400 x 350 x 180 мм

Класс безопасности: I

Тип аппликационной части: BF

Классификация по MDD: IIa

93/42/ЕЕС:

Число подсоединений: 8

Отрицательное давление: от 0 до 500 кПа,

Продолжительность массажа: 0-99 мин.

Продолжительность макс. отрицательного давления: 0 - 60 с

Продолжительность мин.отрицательно давления: 0 - 60 с

Число стандартных программ: 5 - заложенных в память аппарата

Число свободных программ: 5

Стандартное оборудование в чемоданчике:

комплект аппликаторов - 15 шт.

подсоединительные трубки - 2 шт.

электрошнур 1 шт.

массажное масло - 1 шт.

Инструкция по применению

Iskra Medical d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana, Slovenija

<http://www.iskra-med.ru>

(495) 678-4466, 671-4198, 671-4197